あお酸歩



もっと青空の下へ



あお酸歩
ユナ



あお酸歩
セパ

[あお酸歩の主な特徴]


- 小さな吸気に対応する吸気センサー、呼吸回数が増えても安定した F_IO_2 を維持する1回放出量制御
- 電池寿命 約500時間（同調器設定 2L/min）
- 断熱圧縮熱発生防止機構、電源「切」時の残圧放出機能、大きな操作部、ヨークガイド（オプション）など、患者さんが安心して同調器を操作できる機能
- Bluetooth通信による遠隔監視システムでの使用状況モニタリングやボンベ残量セルフモニタリング

仕 様


販売名	あお酸歩ユナ	あお酸歩セパ
一般的名称／クラス分類	呼吸同調式レギュレータ／管理医療機器	
認証番号	231AHBZX00004000	301AHBZX00012000
寸法（単位：mm／凸部除く）	W124×H56.5×D105	W106×H91×D72
重量（単３アルカリ乾電池２本含）	約700g	約325g
節約率	約3.9倍（IE比1:2／呼吸回数20bpm時）	
感度	-0.2Pa（-0.015cmH_2O）以下	
電池寿命	約500時間（同調設定 2L/min相当、呼吸回数 20bpm時）	
流量設定	同 調	0.5/0.75/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6/7 L/min相当
	連 続	0.5/0.75/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6/7 L/min
商品コード／商品名	3320311／あお酸歩ユナ（BT）	3320321／あお酸歩セパ（BT）
データ管理	内蔵Bluetoothによる通信で遠隔モニタリングシステムImagineSに対応	

断熱圧縮熱発生防止機構

酸素ボンベから急激に酸素が流れ込んでも断熱圧縮熱発生防止機構により、ゆっくりと酸素を調整器内に流し込むので、高温の断熱圧縮熱を発生させません。（あお酸歩セパはY型調整器「MPR あお」にこの機能が搭載されています。）

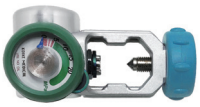

Y型調整器 MPR あお

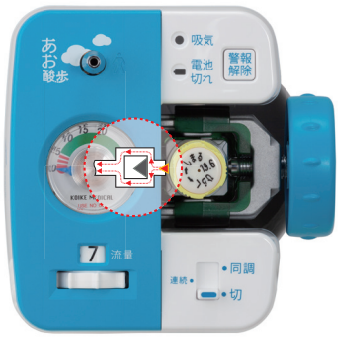

あお酸歩ユナ（※1）

ボンベ装着例




あお酸歩ユナ（※1）



あお酸歩セパ（※2）

呼吸回数によるF_IO_2の変化

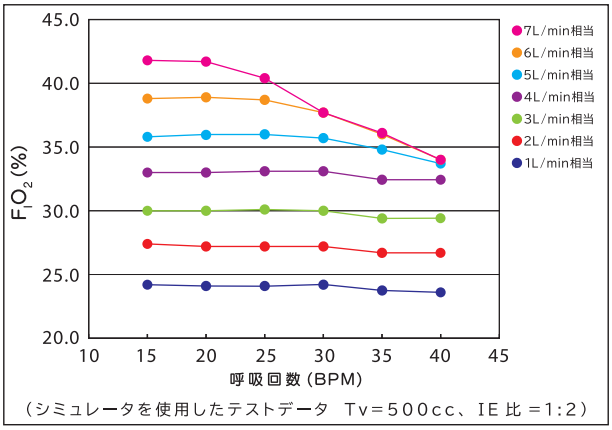

（シミュレータを使用したテストデータ Tv=500cc、IE比=1:2）

［データ管理］

遠隔モニタリングシステム
"ImagineS"（イマジンズ）

ImagineS

内蔵Bluetoothによる通信で遠隔モニタリングシステムImagineSに対応。使用状況やボンベ残量等の確認・管理が可能です。



ボンベ残量モニタリング画面

※1. あお酸歩ユナ装着例：ボンベにヨークガイド(オプション)とともに装着
※2. あお酸歩セパ装着例：ボンベにY型調整器 MPR あお、ヨークガイド(オプション)とともに装着
●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。●製品の定格及びデザインは改善等の為予告なく変更する場合があります。●画像は一部合成です。

発 売 元 株式会社 小 池 メ デ ィ カ ル
本 社 〒132-0031 東京都江戸川区松島1−24−8
TEL:03(5662)6605
www.koike-medical.co.jp
製造販売元 株式会社 群 馬 コ イ ケ

■お問い合わせは…

2022.7