flow gentle+ QUATRO

■仕 様

ダイヤルカラー	黄色	水色
一般的名称	呼吸同調式レギュレータ	
販 売 名	フロージェントル プラス クアトロ	
承認番号	21800BZZ10101000	
使 用 ガ ス	日本薬局方酸素（純度99.5%以上）	
ボンベ充填圧力	19.6 MPa以下	14.7MPa以下
減 圧 圧 力	0.35MPa	
耐圧試験圧力	32.7MPa	24.5MPa
気密試験圧力	19.6MPa	14.7MPa
安全弁作動圧力	22.3～26.1MPa	16.7～19.6MPa
節 約 率	約3.8倍	
重 量	590g	
サ イ ズ	H131mm×⌀55mm	

流量設定目盛										
同調					連続（L/min）					
1	2	3	4	5	0.5	1	2	3	4	5

●管理医療機器


取り扱い業者の方へ

酸素の充填

酸素を充填する際は、付属の充填ガット（オプション）を写真のように取り付けてください。





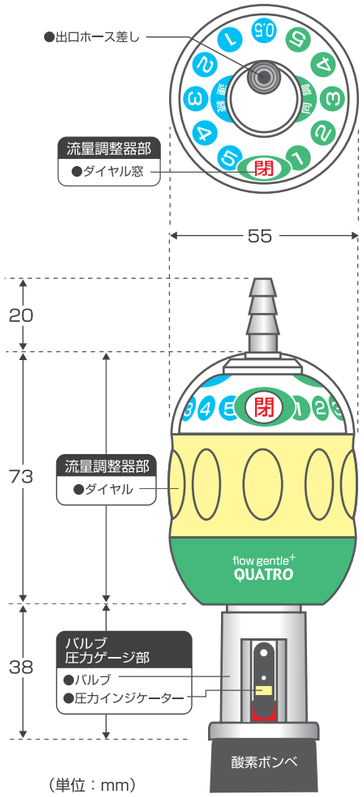

（単位：mm）

⚠注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

●製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
●製品の定格及びデザインは、改善等の為予告なく変更する場合があります。

人とともに呼吸する。
KOIKE MEDICAL

発売元　株式会社小池メディカル
本　社　〒132-0031 東京都江戸川区松島 1-24-8
03-5662-6605（代）
http://www.koike-medical.co.jp/

製造販売元　**株式会社 群馬コイケ**

■ お問い合わせは

08055000

人とともに呼吸する。
KOIKE MEDICAL

〈バルブ一体型呼吸同調器〉

flow gentle+ QUATRO

4つの機能が
ひとつになりました。



承認番号 21800BZZ10101000

4つの機能がすっきりひとつになって590g。

flow gentle+
フロージェントル プラス クアトロ
QUATRO

ピンインデックスバルブ・圧力インジケータ・流量調整器、さらに呼吸同調器までもが
一体になった「クアトロ」。患者さんも簡単に、そして安心してお使いいただけます。



セットはこれだけ。操作も簡単。漏れなく安全。

STEP1
つないで

カニューラを
クアトロに
接続します。



STEP2
あわせる

ダイヤルを
回して数字
を合わせます。




ボンベバルブと呼吸同調器、流量調整器が一体ですから、同調器、流量調整器の取り付け不備、チューブ・シールの消耗による酸素漏れがありません。また、ボンベバルブ開閉時の急激な圧力移動がないため、高い断熱圧縮熱の発生もありません。19.6MPaボンベも、どなたにも安心してご使用になれます。

酸素をこんなにも節約。

効率良い酸素放出で、ボンベを約3.8倍長持ちさせます。300ccボンベでも約3.8時間※使用可能になるので、活動的な患者さんには最適な携帯ボンベが提供できます。　※呼吸回数20bpm、I：E＝1：2　設定1、19.6MPa酸素充填時

容量(L)	同調時使用可能時間(H)				
	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5
0.3	3.8	1.9	1.3	1.0	0.8
1.1	13.9	7.0	4.6	3.5	2.8
2.0	25.3	12.7	8.4	6.3	5.1
2.8	35.5	17.7	11.8	8.9	7.1

（19.6MPa 酸素充填時）

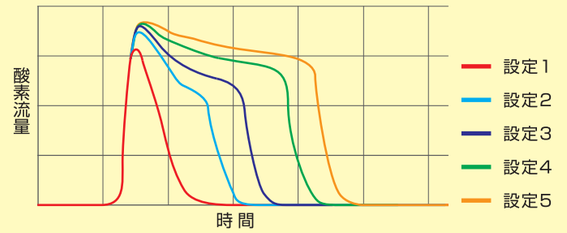

種類もいろいろ、携帯ボンベ。

最小容器は同調器付きでも1.1kg。患者さんの活動性を向上させます。

