HighFO
by koike medical


■ 仕様

一般的名称	非加熱式ネブライザ
販　売　名	ハイホーネブライザー
届出番号	10B2X00014H00001
内　容　量	420cc
使用ガス	医療用酸素
ホース接続口	口径φ22mm
外形寸法	222mm×φ88mm

・一般医療機器 ・再使用禁止 ・未滅菌

性能　酸素濃度：±3%

酸素流量［L/min］	10	15	20	25	30	35	35
酸素濃度［%］	40	50	60	70	80	90	98
トータルフロー［L/min］	42	41	41	40	40	40	36

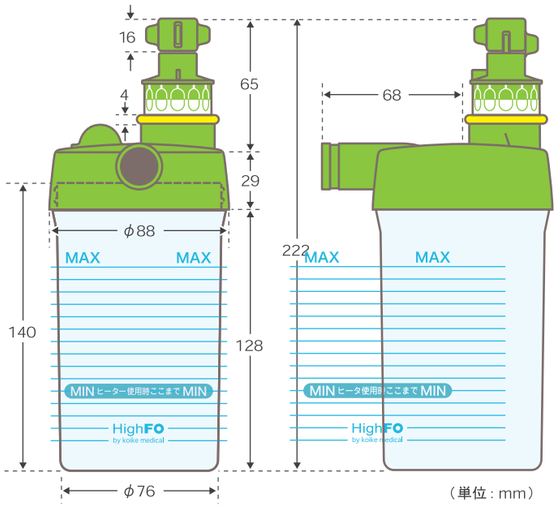

（単位：mm）

■ オプション

一般的名称	単回使用人工呼吸器用ウォータトラップ
販　売　名	ハイホーウォータトラップ
届出番号	13B1X00009000090

・一般医療機器 ・再使用禁止



販　売　名	ハイホーヒーター
電　　源	AC100V
電　　力	100W
温　　度	50度±5℃（満水時ネブライザー作動なし）
コードの長さ	2.4m
安全装置	過熱防止用サーモスタット



■ 関連商品

一般的名称	酸素治療フローメータ
販　売　名	フロージェントル プラス P形
承認番号	21200BZZ00203000
形　　式	P-35LH（ダイヤル色：水色）
流量目盛	0,5,8,10,12,15,17,20,22,25,30,35（L/min）

・管理医療機器



一般的名称	酸素治療フローメータ
販　売　名	セフティフロー
認証番号	21000BZZ00016000
形　　式	P-312（ナット色：金色）
流量範囲	5〜35（L/min）

・管理医療機器



⚠注意　正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

●製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
●製品の定格及びデザインは、改善等の為予告なく変更する場合があります。

人とともに呼吸する。
KOIKE MEDICAL

発売元　株式会社小池メディカル
本　社　〒132-0031 東京都江戸川区松島 1-24-8
03-5662-6605（代）
http://www.koike-medical.co.jp/

製造販売元　株式会社 群馬コイケ

■ お問い合わせは

12025000NO

人とともに呼吸する。
KOIKE MEDICAL

HighFO

ハイホー ネブライザー
by koike medical
届出番号 10B2X00014H00001


高流量システムで
高濃度酸素吸入を…



シンプルなシステムで高濃度酸素吸入

ハイホーネブライザーは高流量システムとして、成人の吸気に十分なフローと共に、低濃度から高濃度まで確実な酸素吸入を可能にしました。

これが HighFO by koike medical

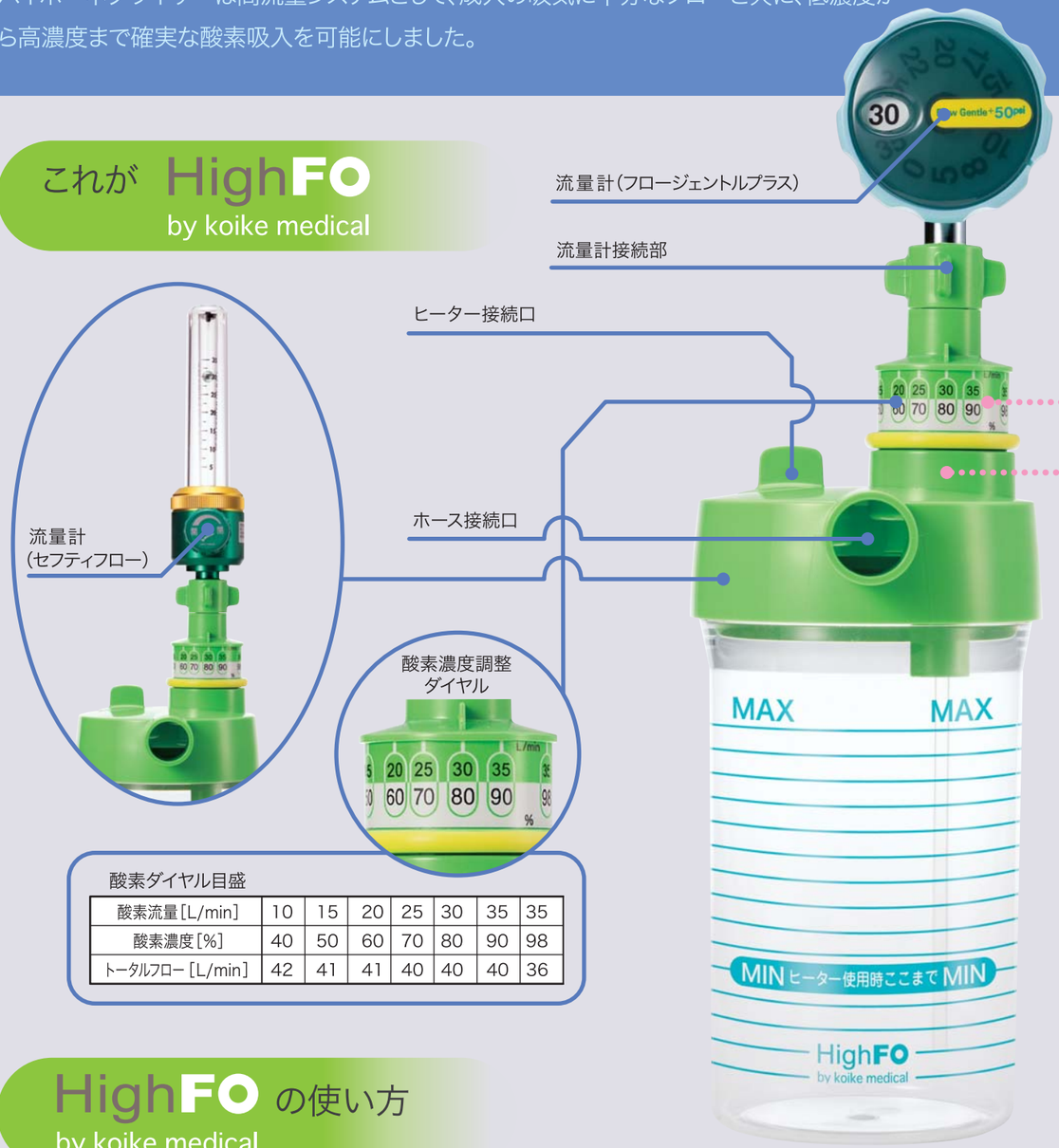

酸素ダイヤル目盛

酸素流量［L/min］	10	15	20	25	30	35	35
酸素濃度［%］	40	50	60	70	80	90	98
トータルフロー［L/min］	42	41	41	40	40	40	36

HighFO の使い方 by koike medical

使い方は簡単。酸素濃度調整ダイヤルで酸素濃度を設定した後、流量計をダイヤルに表示されている酸素流量に合わせるだけ。
これだけで正確な酸素濃度供給が可能になります。



流量計と接続



ネブライザーの酸素濃度を設定



表示に合わせて酸素流量を設定

HighFO の3つのポイントQ&A by koike medical

Q.1 どんな時にハイホーネブライザーを使用するの？

A.1 従来のネブライザー、ベンチュリーマスクやリザーバーマスクでは、成人患者の高濃度酸素吸入はできません。ハイホーネブライザーは、酸素濃度40～98%まで35L/min以上の流量で供給するので、確実に高濃度酸素吸入が可能となります。


- 従来のネブライザーで酸素化が改善されない場合
- リザーバーマスクで酸素化が改善されない場合
- マスクとカニューラを併用しても酸素化が改善されない場合

など、間質性肺炎をはじめとして、I型急性呼吸不全に高濃度酸素吸入が必要な場合にお使いいただけます。



Q.2 15L/min以上の酸素流量は供給できないの？

A.2 従来のネブライザーはネブライザー自身の抵抗により、流せる酸素流量は15L/min程度でした。
ハイホーネブライザーは分流弁を内蔵することにより、35L/minまで酸素を流すことができます。そのため、酸素濃度98%でも効果的に患者さんに供給できます。

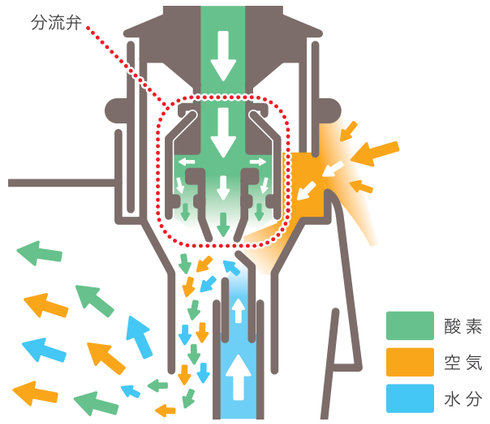

Q.3 ネブライザーは水分量が過剰？

A.3 ネブライザーから放出される水分量は過剰です。特に、ヒーター使用時は結露が発生しやすく、ウォータートラップの取り付けなど注意が必要です。
ハイホーネブライザーは、過剰になりがちなネブライザーからの水分供給量を削減し、蛇管やウォータートラップに溜まる結露の発生を低く抑えました。

