Better choice.
For patient safety.

より安全な酸素療法を



firesafe

ファイアセイフ

ファイアセイフは酸素吸入用の鼻力ニューラや酸素マスク、酸素チューブに取り付けて使用します。

ファイアセイフを取り付け、機能を説明することにより患者様、またそのご家族へ禁煙、火気厳禁の重要性を改めて認識させることができ、ファイアセイフの存在が火災予防への注意を促します。

在宅酸素の様々な"危険な火"にそなえて…


ファイアセイフは、万が一の酸素チューブ発火時にヒューズの様に機能して酸素の供給を自動的に止め、酸素による火災への影響を最小限に抑えます。




Firesafe　ファイアセイフ

ファイアセイフに火が到達すると、チューブの延焼をしっかり防止します。


■着火したチューブの延焼の様子［右チューブ：ファイアセイフ（赤円内）を接続　左チューブ：ファイアセイフ未接続］

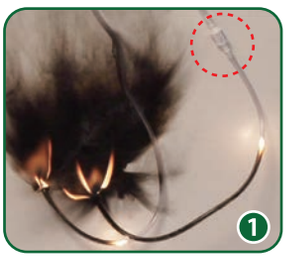


①酸素チューブに着火すると白い壁が煤で黒くなるほどの勢いで延焼

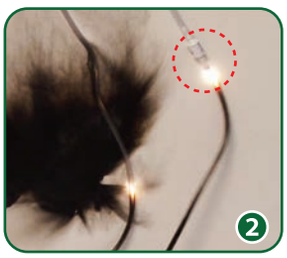

②ファイアセイフを接続した右チューブの火がファイアセイフに到達

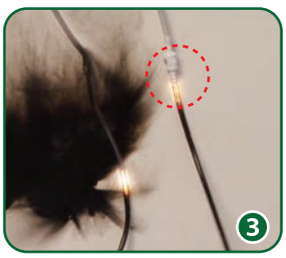

③ファイアセイフに到達した右チューブの火の勢いは弱まる

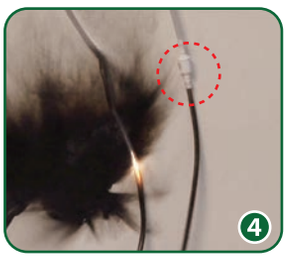

④ファイアセイフを接続した右チューブの火が鎮火

firesafe ムービー
チューブ延焼の様子を含むファイアセイフについてのムービーを公開中です。



双方向
カニューラバルブ



ノズルタイプ

在宅酸素における危険な火は、患者様ご本人による喫煙だけでなく、ご家族による喫煙、料理、線香、暖房器具など様々です。
酸素吸入時は、火災予防策を十分に施すことが必要です。



■仕様

販売名（形状）	ファイアセイフ 双方向カニューラバルブ	ファイアセイフ（ノズルタイプ）
一般的名称	能動型機器接続用ストップコックバルブ	汎用ストップコックバルブ
クラス分類	管理医療機器	一般医療機器
承認番号／届出番号	23100BZX00114000	13B1X00009000091
寸法（単位：mm）	本体：幅 61.5× 外径φ14.05	本体：幅 50× 外径φ19
使用流量範囲	0.25 ～ 25L／分	25L／分以下（推奨使用流量 0.7L／分以上）
使用圧力	0.60MPa 以下	1MPa 以下
包装単位	10 個／1 梱包	



本器は患者様の酸素吸入時の喫煙や火気使用を推奨するものではありません。
また、本器はチューブ発火時等の延焼を最小限に抑えるためのものであり、火災事故を防止するための器具ではありません。
火災事故等の防止のためには、患者様への指導管理の徹底を図るなど十分な対策を講じてください。

⚠ 安全に関するご注意

- 正しく安全にご使用いただくため、ご使用の前に必ず添付文書をよくお読み下さい。
- 詳しくはかかりつけの医療機関、お近くの小池メディカル営業所までお問い合わせ下さい。
（http://www.koike-medical.co.jp/profile/branch.php）

●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。
●製品の定格及びデザインは改善等の為予告なく変更する場合があります。

製造販売元　株式会社 小 池 メ デ ィ カ ル
本　　社　〒132-0031　東京都江戸川区松島 1－24－8
TEL:03（5662）6605
www.koike-medical.co.jp

■お問い合わせは…

2019.11