yox candy

ヨックス キャンディ

すばやく かんたん 清潔


少量の吸引に対応します。



■使用方法

1. 接続


カテーテル、ペイシェントホースを図の様に取り付けて下さい。

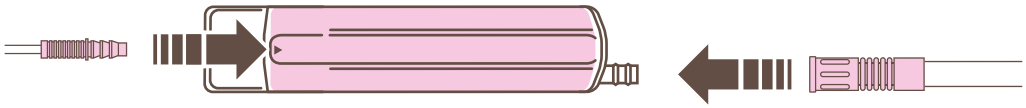


カテーテル　　ペイシェントホース

2. 吸引操作

できるだけ本体を上向き、または斜め上向きにしてお使いいただくと、効率よく吸引できます。

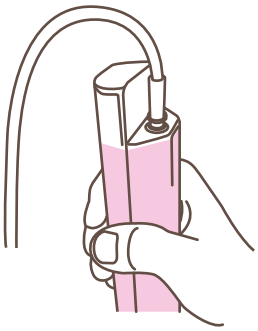

上向き

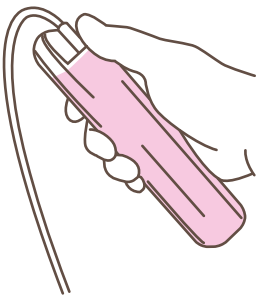


斜め上向き

3. 操作終了

ホース側の内部フィルターに水分が到達すると、吸引は自動的に停止します。

使用後は感染性廃棄物として廃棄してください。

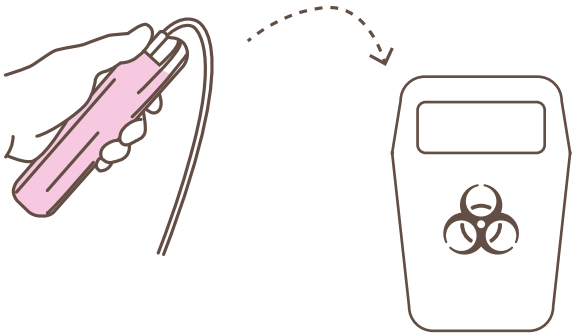

■仕様

一般的名称	吸引器用キャニスタ
販売名	ヨックスキャンディ S1001
医療機器届出番号	10B2X00014A00008
医療機器分類	一般医療機器

サイズ（mm）	185×Φ38
容積	150mL
重量	62±10g
入口吸引圧力	0～−80kPa

●再使用禁止

［製造販売業者：株式会社群馬コイケ］

●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。●製品の定格及びデザインは改善等の為予告なく変更する場合があります。●画像は一部合成です。
KOIKE GROUP は小池酸素工業株式会社の関連企業グループのブランド名称です。株式会社小池メディカルは KOIKE GROUP に属する医療機器メーカーです。

株式会社小池メディカル

〒132-0031 東京都江戸川区松島 1-24-8
☎ 03(5662)6531

koike-medical.co.jp

■お問い合わせは…

2026.5