ハイホーネブライザー

製造販売元
株式会社群馬コイケ

2025.01

高流量システムで高濃度酸素吸入を



届出番号	10B2X00014H00001
一般的名称	非加熱式ネブライザ
クラス分類	• 一般医療機器

※再使用禁止、未滅菌

■製品仕様

容量	420mL
使用ガス	医療用酸素
精度	酸素濃度　± 3%
ホース接続口	口径Φ 22mm
寸法	W88 × D88 × H222 mm

ハイホーネブライザー

高濃度酸素吸入


酸素濃度40 ～ 98%まで35L/min以上の流量で供給し、確実に高濃度酸素吸入が可能です。

- ●従来のネブライザーで酸素化が改善されない場合
- ●リザーバーマスク酸素化が改善されない場合
- ●マスクとカニューラを併用しても酸素化が改善されない場合

など、間質性肺炎をはじめとして、Ⅰ型急性呼吸不全に高濃度酸素吸入が必要な場合にお使いいただけます。



35L/minの酸素供給量

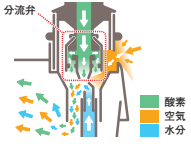

分流弁を内蔵することで35L/minまで酸素を流すことができます。これにより酸素濃度98%でも効果的に患者さんに供給できます。流量従来はネブライザー自身の抵抗により流せる酸素流量は15L/min程度でした。

放出水分量軽減

ハイホーネブライザーは過剰になりがちなネブライザーからの水分供給量を軽減し、蛇管やウォータートラップに溜まる結露の発生を低く抑えました。



使い方は簡単

①流量計と接続



②ネブライザーの酸素濃度を設定



③表示に合わせて酸素流量を設定



酸素濃度調整ダイヤル

酸素流量［L/min］	10	15	20	25	30	35	35
酸素濃度［%］	40	50	60	70	80	90	98
トータルフロー［L/min］	42	41	41	40	40	40	36

2種から選べる専用流量計

フロージェントルプラス　P-35LH



承認番号	21200BZZ00203000
一般的名称	酸素治療フローメータ
クラス分類	• 管理医療機器
流量目盛	0,5,8,10,12,15,17,20, 22,25,30,35（L/min）

セフティフロー　P-312



認証番号	21000BZZ00016000
一般的名称	酸素治療フローメータ
クラス分類	• 管理医療機器
流量範囲	5 ～ 35（L/min）

■製　品　　（MS：ピンインデックス　AM：シュレーダー）

品名	商品コード	価格	備考
ハイホーネブライザー《6 個》	315202	¥24,000	
セフティフロー　P-312　MS	310211	¥14,400	ナット金色
セフティフロー　P-312　AM	310213	¥16,500	ナット金色
フロージェントルプラス　P-35LH　MS	314601	¥33,000	ダイヤル水色
フロージェントルプラス　P-35LH　AM	314621	¥34,000	ダイヤル水色

■オプション

	商品コード	価格
ハイホーウォータートラップ　《5 個》	315221	¥7,700
エアゾールマスク L　ロング《10 個》	315243	¥11,000
エアゾールマスク M　ロング《10 個》	315244	¥11,000
蛇管　30m	315231	¥11,000

〈オプション〉



届出番号	13B1X00009000090
一般的名称	単回使用人工呼吸器用ウォータトラップ
クラス分類	• 一般医療機器

※再使用禁止