HOPE クイックガイド ご使用前手順

本クイックガイドは取扱説明書、添付文書をよく読んでからご使用ください。


KOIKE MEDICAL 人とともに呼吸する。

1 ライナーを個装袋から取り出し、ゆっくり引き伸ばします。






各部の名称

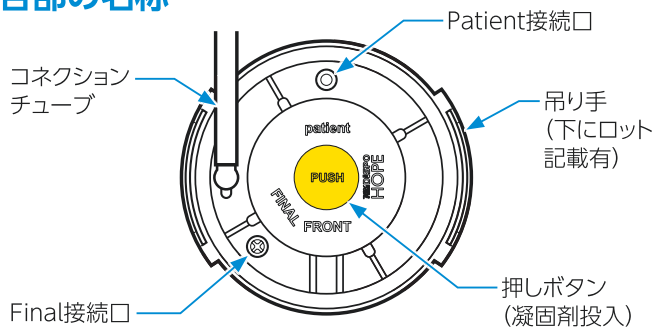


正面方向(ロゴ印字)


2 ライナーのロゴ・目盛りが必ず正面にくるように各キャニスターボトルへセットします。




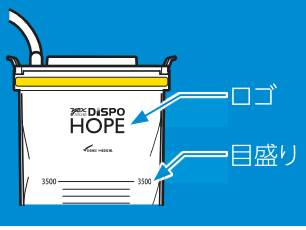


3 コネクションチューブを隣のライナーのPatient接続口へ接続し、最後のチューブのみ自身のFinal接続口へ接続します。(①ライナーから②ライナーの順番で接続します。)

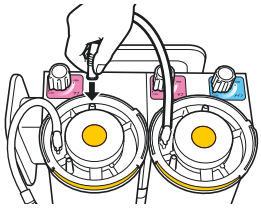

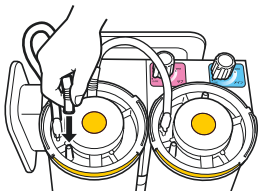


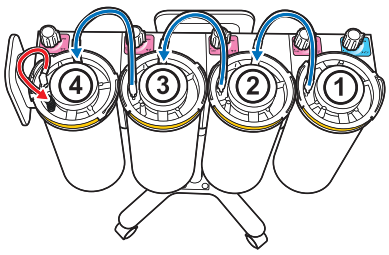

4連パノラマタイプ

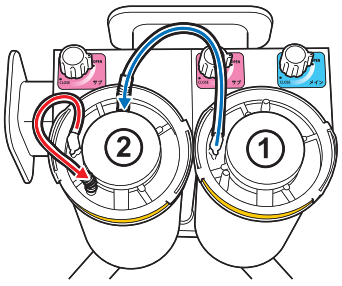


2連タイプ

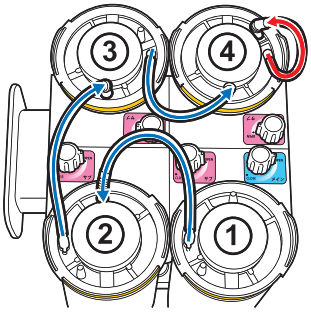


4連サークルタイプ

※ペイシェントホース、ポリープキャッチャー、微量ボトル、骨片トラップは①ライナーのPatient接続口へ接続します。
ペイシェントホースは弊社純正品　SWペイシェントホースを推奨致します。


4 メインバルブ、サブバルブの順でOPENに切り替えます。

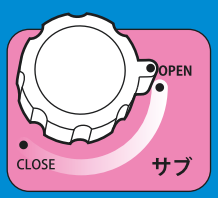

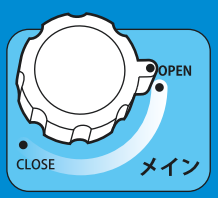


メインバルブ：本体のON/OFFバルブ
サブバルブ　：各キャニスターボトルのON/OFFのバルブ

5 ライナーに吸引圧がかかり、ライナー自体が完全に膨らんでいることを確認してからご使用ください。

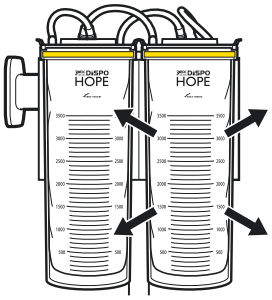


良い例

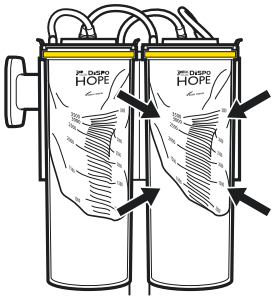

悪い例


HOPE クイックガイド ご使用後手順

1
バルブがOPENになっているのを確認してからSWペイシェントホースを抜いてください。

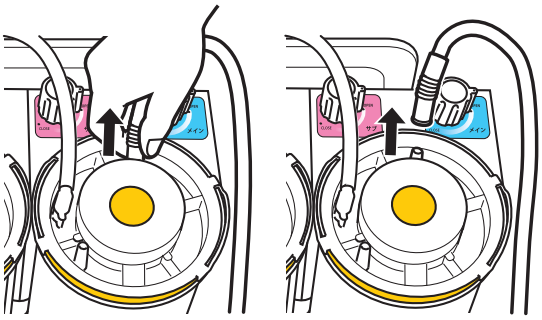


バルブはOPEN（吸引圧がかかった状態）

2
廃棄するライナーのコネクションチューブをPatient接続口へ挿入し、密封してください。

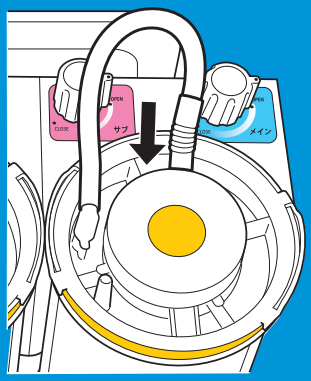

バルブはOPEN（吸引圧がかかった状態）

3
上蓋の押しボタンを 押して凝固剤を投入してください。

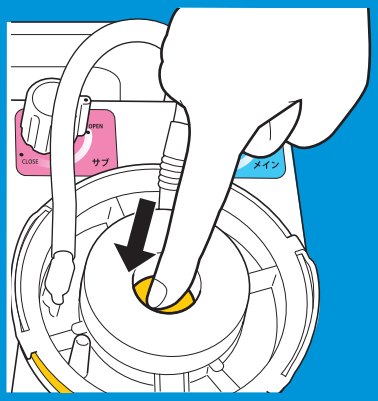


バルブはOPEN（吸引圧がかかった状態）

4
サブバルブをCLOSEにし、吸引圧がなくなった状態からライナーを両手で持ち、引き抜いてください。



バルブをCLOSE（吸引圧がなくなった状態）

主な消耗品、オプション品

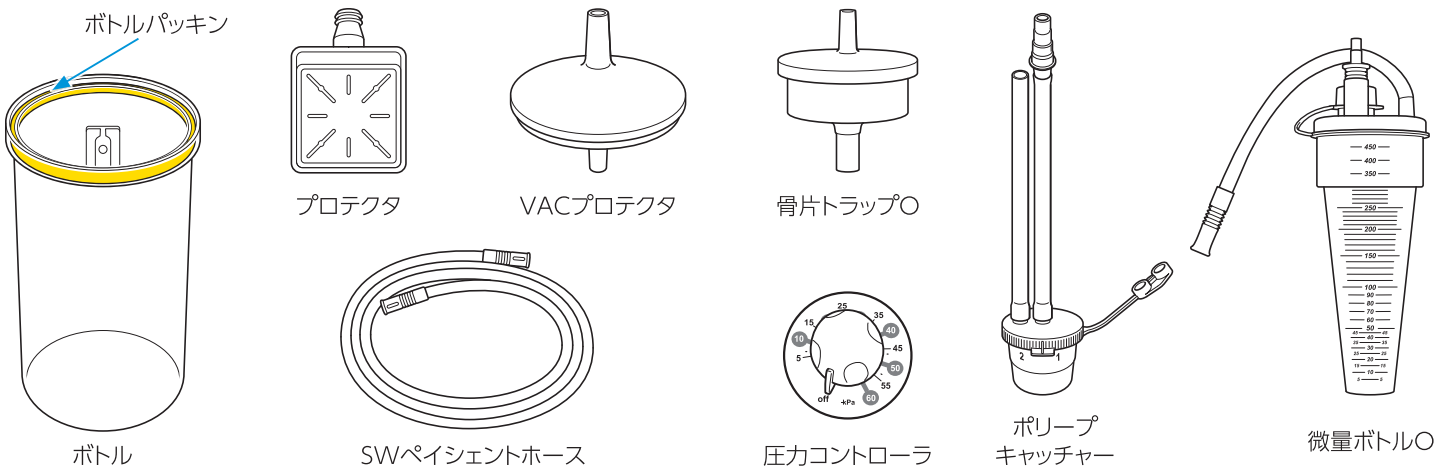

※添付文書記載の保守・点検方法に従い点検を実施してください。
プロテクタ/VACプロテクタは少なくとも1年に1回を目安に交換してください。