## 仕様

| | |
|---|---|
| jusmine.Z | 本体 |
| 販売名 | Z1 オートシステム |
| 認証番号 | 229ALBZX00016000 |
| JANコード | 4540752007408 |
| JMDNコード | 37234000 |
| 一般的名称 | 持続的自動気道陽圧ユニット |
| クラス | 高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器 |
| 寸法 | 164mm×83mm×51mm |
| 重量 | 295g（バッテリ併用時787g） |
| 定格電圧/周波数 | AC 100V-240V（50/60Hz） |
| 出力電圧 | DC15V / 2.0A |
| 電撃に対する保護の形式による分類 | クラスⅡ機器 |
| 電撃に対する保護の程度による装着部の分類 | BF形装着部 |
| 換気モード | CPAP / AUTO-CPAP |
| 圧力 | 4～20cm$H_2O$<br>0.5cm$H_2O$毎設定可 |
| ランプ圧 | 4cm$H_2O$～ |
| ランプ時間 | 0～45分<br>5分毎設定可 |

| 商品コード | 商品名 |
|---|---|
| 3341301 | jusmine.Z（AUTO-CPAP） |
| 3342301 | jusmine.Z 外付けバッテリキット |
| 3342302 | jusmine.Z 交換用バッテリ |
| 3342309 | jusmine.Z 呼吸回路 |
| 3342303 | jusmine.Z フィルター（6パック） |
| 3342304 | jusmine.Z チューブ本体アダプタ |
| 3342305 | jusmine.Z 電源アダプタ |
| 3342306 | jusmine.Z フィルターキャップ |
| 3342307 | jusmine.Z Qチューブ |
| 3342308 | jusmine.Z Qチューブリプレイスメントキット（6パック） |

## 構成品



## その他製品一覧






●製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
●製品の定格及びデザインは、改善等の為予告なく変更する場合があります。

人とともに呼吸する。
KOIKE MEDICAL
製造販売元　株式会社小池メディカル
本　社　〒132-0031 東京都江戸川区松島 1-24-8
03-5662-6605（代）
http://www.koike-medical.co.jp

■ お問い合わせは

2017.07

どこでも手軽に、CPAP療法を。

ジャスミン.Z

# jusmine.Z

持続的自動気道陽圧ユニット




原寸大

持ち運びにも便利な小型・軽量のボディに、
効果的なCPAP療法を実現する機能を搭載。
様々な場所で手軽に使うことができる、
深く良質な睡眠をもたらすCPAP機器です。

人とともに呼吸する。
KOIKE MEDICAL

# コンセントが無い場所でも使用OK! 旅行や出張先で活躍する、手のひらサイズのCPAP機器、Jusmine.Z。

ジャスミン.Z
**Jusmine.Z**
持続的自動気道陽圧ユニット

## Small & lightweight for travel

### コンパクトで超軽量だから、外出先への持ち運びも楽々。

旅行や出張時にCPAP機器を携行する際、重いCPAP機器を専用バッグに入れて他の荷物と一緒に持ち運ぶのは、面倒と感じる方も多いでしょう。しかし、バッグの片隅に収まる全長約16cmのコンパクトサイズ、295gという常識を覆す超軽量を実現したJusmine.Zなら心配いりません。荷物を増やすことなく手軽に携行でき、外出先でもいつものようにCPAP療法を行えます。







## User-friendly quality

### 睡眠を妨げない低振動・低騒音。簡単操作の呼吸補助機能も搭載。

使う人のことを第一に考えて設計されたJusmine.Zは、コンパクトサイズながらも振動がきわめて少ないうえ、26dBA*という低騒音を実現。使用する際、振動や騒音により睡眠が妨げられることはありません。さらにどなたでも簡単に空気圧を調整できる、呼吸補助機能のZ-breatheを搭載しており、「1：弱/2：中（標準）/3：強」の3段階から呼吸に適した圧力を選択できます。

*Declared dual-number noise emission values in accordance with ISO4871

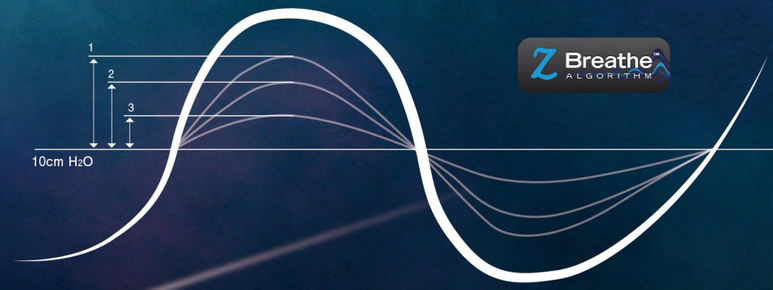



## Long time continuous operation

### リチウムイオンバッテリーの採用で、8.5時間の連続稼働を実現。

Jusmine.Zは、大容量の専用リチウムイオンバッテリーを採用することで、8.5時間の連続稼働を可能にしています*。キャンプや泊まりがけ登山といったアウトドアをはじめ、長距離運転の際の車中での休憩時、落雷や豪雨による不意の停電時など、コンセントから電源をとれない状況でも十分な時間の連続稼働が可能となっているので、いつでもどこでも安心して使用できます。*Z-breathe=2　14cmH₂Oで使用時



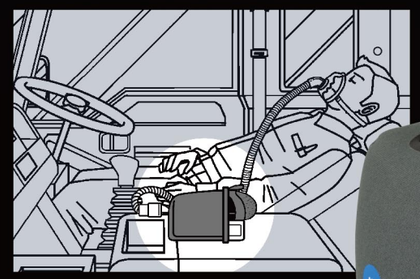



## Convenient mobile app




### お手持ちのスマートフォンで使える、便利な専用アプリもご用意。

無料の専用アプリNitelogをスマートフォンにダウンロードして、Jusmine.Z本体とBluetoothでペアリング（接続）すれば、「無呼吸・低呼吸回数」「使用時間」「圧力」といった使用中の各種データを、スマートフォンで確認することができます。患者と医師のコミュニケーションツールとしても利用でき、アドヒアランスの向上に役立てられます。またこのアプリを使って、リモコンのように電源のON/OFFといった各種操作も可能です。

